



CoagXL

Automatický koagulometr

- kontinuální přístup random access
- vysoký výkon až 300 PT/hod* a 170 PT + APTT testů/hod*
- koagulační, imunologické a chromogenní testy

VÝROBCE:




VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:



Jednoduchý pracovní postup v 8 krocích

1. Systém

- 44 chlazených pozic pro reagentie
- až 4 pro pufrы
- až 8 pro kontroly / kalibrátory
- reagentie s čárovým kódem

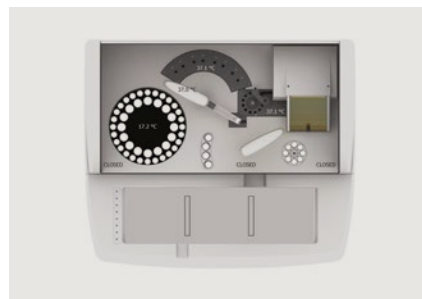


2. Spotřební materiál

- až 1000 kyvet
- detekce hladiny kapaliny
- hlášení stavu zásob reagentií a spotřebního materiálu




3. Kalibrace

- autokalibrace
- master kalibrační křivky (čárový kód) dodávané výrobcem
- uložení více kalibračních křivek k jednotlivým metodám

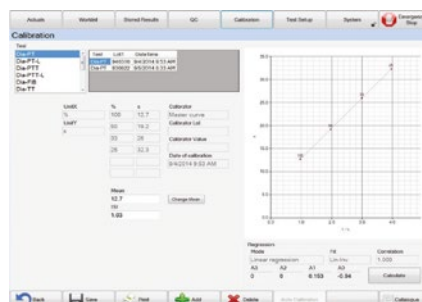

4. Kontrola kvality

- nastavení automatické kontroly
- Levey-Jenningsovy grafy

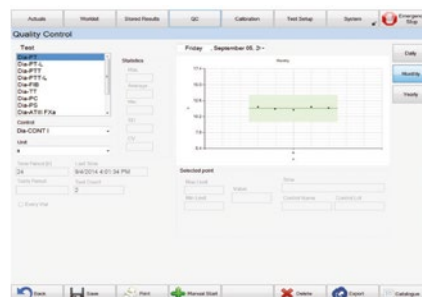

5. Vkládání vzorků

- 150 vzorků
- 15 pozic pro stojany
- oblast řízená senzorem
- 8 statimových vzorků




6. Zadávání testů

- worklist
- random access mód
- kompletní panel testů




7. Spuštění a kontrola

- sledování křivky v reálném čase
- automatické opakování a reflexní testování
- zpětná vazba stavu měření
- kapacita 150 vzorků

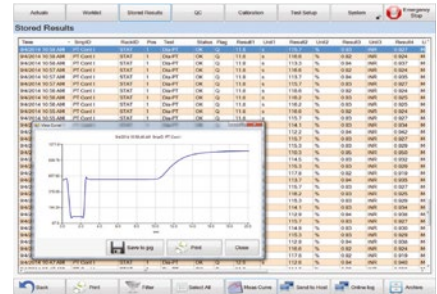

8. Vychutnejte si pohodlí a bezpečnost

- dotyková obrazovka
- obousměrné připojení do LIS
- víceúrovňová ochrana heslem
- dodávané s UPS
- 24/7 online vzdálená podpora

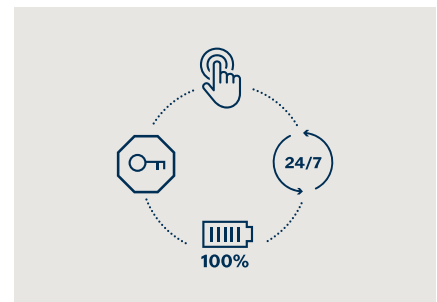

Vlastnosti

- 8 měřicích kanálů, každý se 2 vlnovými délkami
- kontinuální přístup v random access módu
- snadné ovládání
- nenáročná údržba
- technologie cap piercing
- 24/7 vzdálený přístup v reálném čase
- přístroj / reagensie / systém kontroly kvality od jednoho výrobce
- maximální kapacita 150 vzorků / 1000 kyvet
- unikátní systém transportu kyvet

Technické parametry

Režimy měření	
Fotometrie	405 nm
Turbidimetrie	570 nm
Nefelometrie	640 nm
Výkon	300 PT/hod*, 170 PT + APTT testy/hod*
Zpracování vzorků	150 odběrových zkumavek v 15 stojanech
Vkládání reagensií	Čtečka čárových kódů nebo ruční vkládání
Manipulace se STAT vzorky	8 samostatných pozic
Paměť	Uložení více než 1 000 000 naměřených dat a souvisejících křivek
Rozhraní	6 USB rozhraní, síťové rozhraní
Operační platforma	17palcový barevný dotykový displej
Elektrická síť	115/230 ± 15% ~ 60/50Hz, 5A
Rozměry	600 × 1000 × 900 mm (v × š × h)
Hmotnost	85 kg
Síťová pojistka	5A, T

*měřeno pomocí testu Diagon Dia-PT Recombinant

