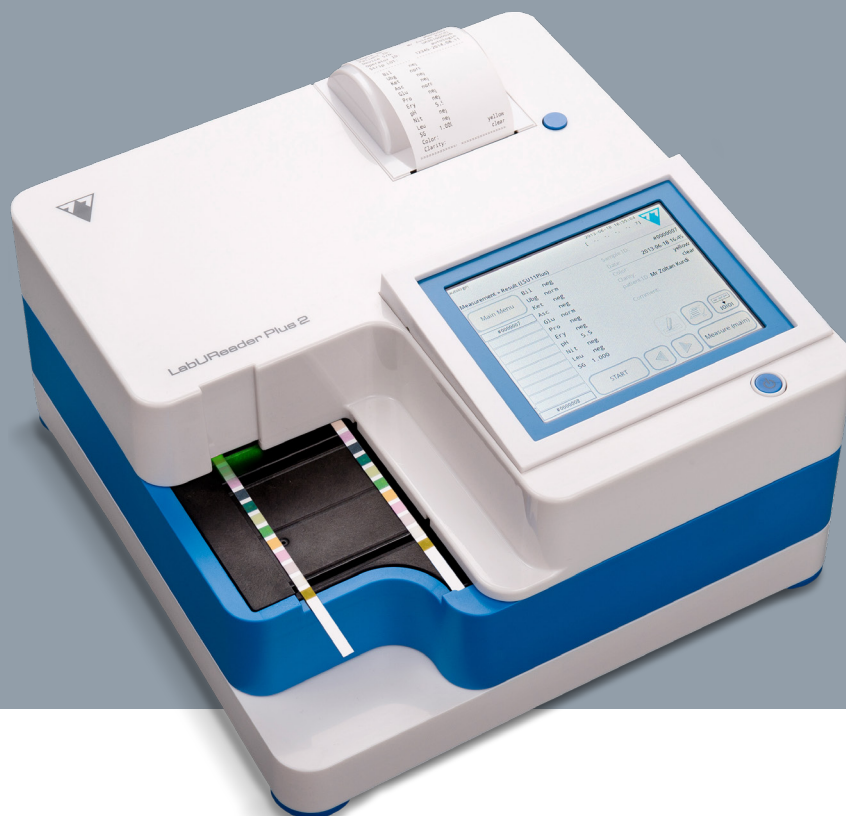




LabUReader Plus 2

Poloautomatický močový analyzátor
LabUReader Plus 2 je určen ke stanovení
moči chemicky pomocí testovacích
proužků LabStrip U11 Plus.

Vyznačuje se vynikající přesností,
jednoduchým ovládáním přes barevný
dotykový displej, plynulým načítáním
a rychlým zpracováním testovacích proužků.

- Ideální pro středně velké laboratoře
- Patentovaná přesná technika fotometrického měření
- Rychlý a spolehlivý výkon až 500 testů/hod
- Snadné ovládání pomocí dotykového displeje
- Automatické spuštění měření po detekci proužku
- **Lze spojit s analyzátozem močového sedimentu**
UriSed Mini a tím zajistit kompletní analýzu moči

VÝROBCE:



77 Elektronika

DISTRIBUTOR:



BioVendor
LM®

Výhody

- Trvalý pohotovostní režim a hygienický bezdotykový provoz s funkcí autostart
- Snadno použitelný software
- Intuitivní a logická struktura menu
- Více možností operátora s různými úrovněmi oprávnění
- Flexibilní, přizpůsobené možnosti testování a reportování
- Ruční zadání barvy, zákalu a dalších komentářů (např. výsledky sedimentu)
- Automatické spuštění měření detekcí proužku
- Označení výsledků a doporučení pro další hodnocení sedimentů
- Minimální údržba a pohodlné čištění

Správa dat

- Efektivní správa dat a rozšířená konektivita
- Automatizovaný přenos výsledků prostřednictvím LIS2 a HL7 protokolů nebo přes USB disk
- Přenos pracovního seznamu prostřednictvím LIS2 a HL7
- Velká kapacita paměti se sofistikovanými kritérii filtrování
- Automatický tisk výsledků
- Import/export nastavení a seznamu operátorů přes USB disk
- Volitelná čtečka čárových kódů a externí klávesnice
- Volitelné externí připojení Wi-Fi

Kontrola kvality a zajištění systému

- Automatická QC analýza (až 3 hladiny)
- Připomenutí testu kontroly kvality
- Podpora informací o šaržích proužků a QC
- Programovatelná správa operátora omezuje úroveň přístupu a zabraňuje neoprávněnému použití

LabStrip U11 Plus

- Vysoce kvalitní a spolehlivé testovací proužky
- Velikost balení: 150 testů
- Trvanlivost: 24 měsíců
- Parametry: krev, glukóza, specifická hmotnost, bilirubin, proteiny, dusitany, urobilinogen, leukocyty, ketony, pH, kyselina askorbová

Technické specifikace

Technologie	refrakční fotometr s vlnovými délkami 505, 530, 620, 660 nm
Kapacita paměti:	5000 výsledků testů pacientů, 1000 výsledků QC
Displej:	5,7" LCD VGA kapacitní barevný dotykový displej (rozlišení: 640 × 480)
Tiskárna:	integrovaná termo tiskárna
Rozhraní:	Ethernet port, RS232 sériový port, USB A, USB B, PS2, podpora USB Wi-Fi adaptéru
Přenosové protokoly:	LIS2 (ASTM+), HL7
Rozměry:	300 × 300 × 170 mm (Š × H × V)
Hmotnost:	6 kg
Elektrické napětí:	100... 240V AC, 50/60Hz, externí síťový adaptér
Provozní podmínky:	15–32°C, relativní vlhkost: 20–80% (bez kondenzace)