


respons®A1c

Jednokrokový analyzátor HbA1c

Přesně


Snadno

Rychle

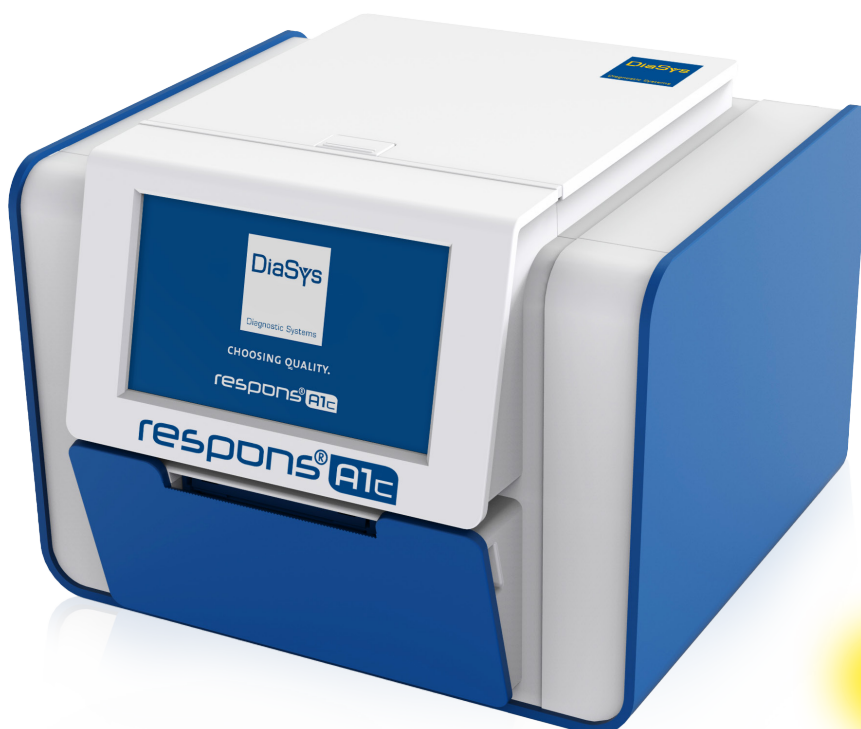

- ✓ kvantitativní stanovení HbA1c
- ✓ afinitní chromatografie
- ✓ předkalibrované kazety
- ✓ objem vzorku 3,5 µl
- ✓ z kapilární nebo z antikoagulované plné krve
- ✓ výsledky po 4,5 minutách
- ✓ 10 jednotlivě balených testů v sadě
- ✓ reagenční kazeta s integrovanou kapilárou

VÝROBCE:


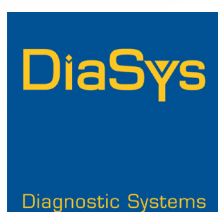


VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:



Bezúdržbový analyzátor respons® A1c

- dotykový displej
- hlasové a video pokyny k testům
- vestavěná termotiskárna
- připojení k síti Ethernet
- integrovaná čtečka čárových kódů

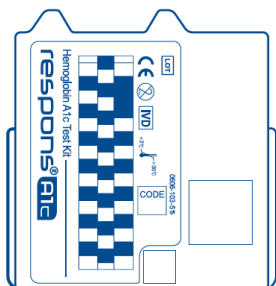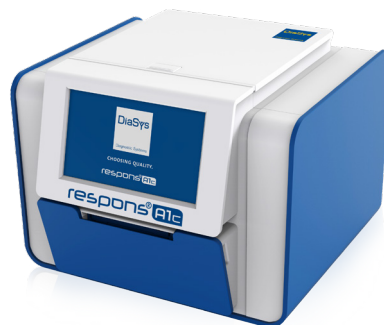

Kazeta respons® A1c Hemoglobin

- kazeta obsahuje všechny potřebné reagenty
- 10 testů v testovací sadě
- předkalibrované kazety s čárovým kódem
- odběrová kapilára integrovaná v reagenční kazetě

Postup testu - výsledek již za 4,5 minuty!



Vložte kazetu do držáku na kazety v analyzátoru.



Odeberte 3,5 µL vzorku s kapilárou, která je součástí kazety.



Vložte kazetu a s odebraným vzorkem a zavřete víko.

Katalogové číslo	Název produktu
963100	analyzátor respons® A1c
963207	respons® A1c sada pro testování hemoglobinu A1c, 10 testů



BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80
851 01 Bratislava, Slovakia
+421 917 878 231
www.biovendor.sk

Mgr. Lenka Bučková
Produktový a obchodný manažér
pre oblasť biochémie a hematológie
+421 907 209 124
buckova@biovendor.sk

